

Backup maken en importeren (nieuwe PC)

- Installeer Database Studio op de (oude) PC waar de database op staat om een Back-up te maken.
- Database Studio is te downloaden vanaf onze website:
<https://www.pt-medical.nl/service/software-handleidingen/?folder=%5CLeveranciers%5CVitalograph%5CSoftware%5CDatabase+Studio>

Open Database Studio

- Ga naar BACK-UP DATABASE en kies bij Server de juiste server door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Kies de juiste Database door op het pijltje naar beneden te klikken.
- Plaats een USB stick in de PC en kies bij Back-uplocatie de USB-stick en klik op BACK-UP

The screenshot shows the 'Spirotrac® Database Studio' application. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The 'BACK-UP DATABASE' option is highlighted with a red rectangle. The main window is titled 'Back-up maken van database' and contains the following fields and buttons:

- Server (Server\exemplaar):** A dropdown menu showing 'LT-AHUITING\SPIROTRAC'.
- Verificatie:** Radio buttons for 'Windows' (selected) and 'SQL'.
- Database:** A dropdown menu showing 'Spirotrac6'.
- Back-uplocatie:** A text field containing 'E:\Tijdelijk'.
- Buttons:** A 'BACK-UPLOCATIE' button next to the location field, and a 'BACK-UP' button at the bottom left of the main window area, which is also highlighted with a red rectangle.

At the bottom of the sidebar, the following information is displayed:


- SOFTWAREVERSIE 6.11.49
- NAAM SYSTEEM LT-AHUITING

Nieuwe Computer

- Installeer Spirotrac volledig inclusief een SQL database op een (nieuwe) PC.
Spirotrac is hier te downloaden:
<https://www.pt-medical.nl/service/software-handleidingen/?folder=%5Cleveranciers%5CVitalograph%5CSoftware%5CVolledige+installatie+incl+SQL%2Dserver>
- Start na installatie Spirotrac om te kijken of de software functioneert en de SQL-Database goed is geïnstalleerd.
- Installeer Database Studio op de (nieuwe PC)
- Plaats de USB stick met de back-up in de nieuwe PC

Open Database Studio


- Klik op DATABASE HERSTELLEN
- Kies de server door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Bedenk een naam voor de Database bv Spirotrac66
- Kies de locatie waar het Backup bestand staat (USB-stick)
- Klik op HERSTELLEN (Er komt een melding dat de database met succes is aangemaakt)

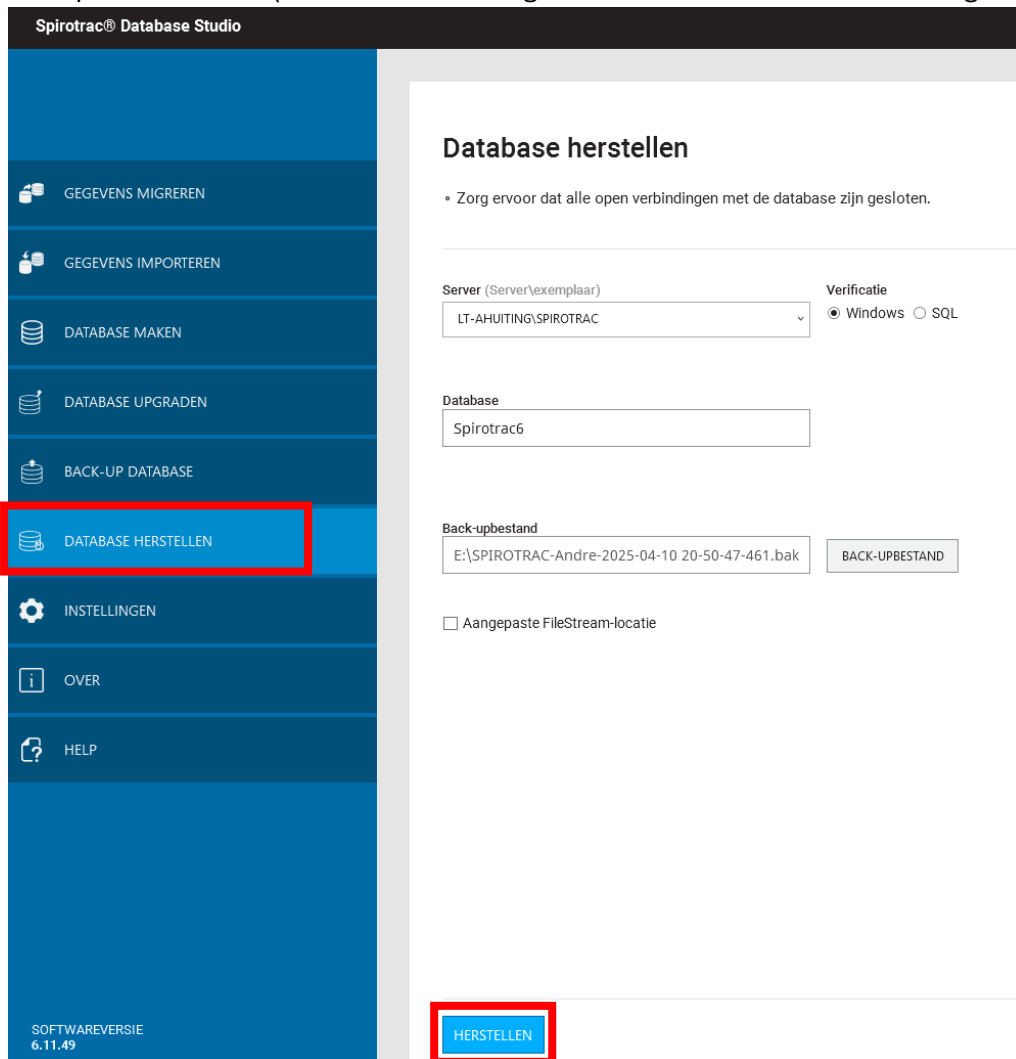


The screenshot shows the 'Spirotrac® Database Studio' application window. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The 'DATABASE HERSTELLEN' option, which includes a database icon, is highlighted with a red rectangle. Below it are 'INSTELLINGEN', 'OVER', and 'HELP'. At the bottom of the sidebar, it says 'SOFTWAREVERSIE 6.11.49'. The main area is titled 'Database herstellen' and contains a warning: '• Zorg ervoor dat alle open verbindingen met de database zijn gesloten.' Below this are three sections: 'Server (Server\exemplaar)' with a dropdown menu showing 'LT-AHUITING\SPIROTRAC' and a small downward arrow; 'Verificatie' with radio buttons for 'Windows' (selected) and 'SQL'; 'Database' with a text box containing 'Spirotrac6'; 'Back-upbestand' with a text box showing 'E:\SPIROTRAC-Andre-2025-04-10 20-50-47-461.bak' and a 'BACK-UPBESTAND' button; and a checkbox for 'Aangepaste FileStream-locatie' which is unchecked. At the bottom right of the main area, a blue button labeled 'HERSTELLEN' is highlighted with a red rectangle.

Open Spirotrac

- Ga naar INSTELLINGEN en daarna naar DATABASE
- Klik op het + teken

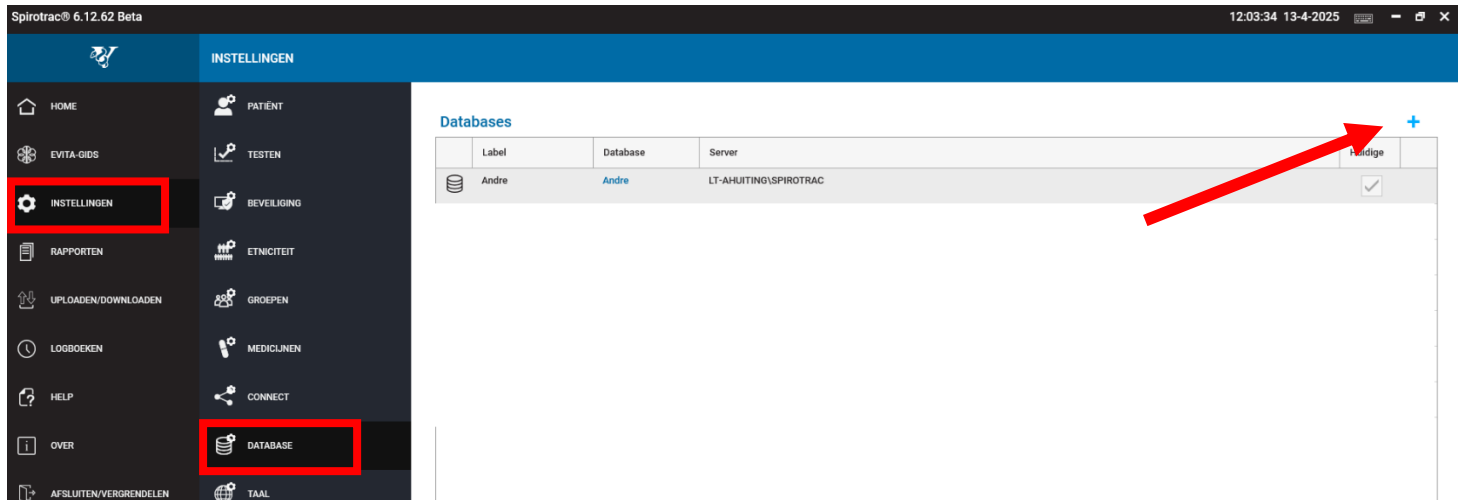

- Kies de juiste server en klik op VERBINDEN

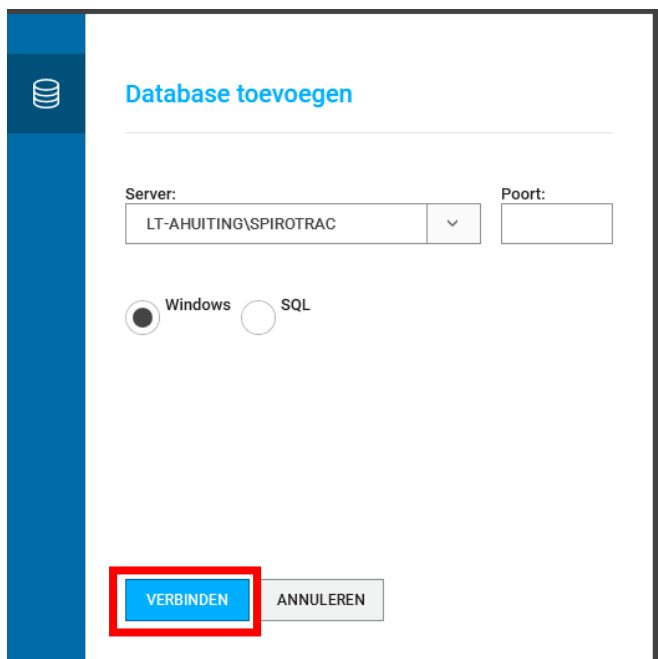

- Kies de juiste Database door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Geef de Database een Label (bv Backup)
- Klik op HERSTELLEN
- De (Back-up) database wordt toegevoegd bij de Databases.

Database toevoegen

Server: LT-AHUITING\SPIROTRAC
Poort: -
WIJZIGEN

Database:
Spirotrac66

Label:
BackUP

HERSTELLEN ANNULEREN

- Zet een vinkje achter de toegevoegde (Back-up) database en klik op JA

Spirotrac® 6.12.62 Beta 21:38:27 10-4-2025

INSTELLINGEN

HOME PATIENT TESTEN BEVEILIGING ETNICITEIT GROEPEN MEDICIJNEN CONNECT DATABASE TAAL

EVITA-GIDS

INSTELLINGEN

RAPPORTEN

UPLOADEN/DOWNLOADEN

LOGBOEKEN

HELP

OVER

AFSLUITEN/VERGRENDELEN

Databases

Label	Database	Server	Huidige
Andre	Andre	LT-AHUITING\SPIROTRAC	☐
Standaard	Spirotrac6	\Spirotrac	☒

Huidige database wijzigen

De toepassing wordt afgesloten en de wijzigingen worden van kracht de volgende keer dat u de toepassing uitvoert. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

JA NEE

Spirotrac sluit af en start daarna Spirotrac weer op. Spirotrac is nu verbonden met de Back-up database.

Stel Spirotrac goed in met de juiste instellingen, zie eventueel hiervoor dit document:

https://www.pt-medical.nl/download/Handleidingen%20Vitalograph/Screenshots%20standaard%20instellingen_wi-24-08.pdf