

# Fax Back Informatie formulier

Voor het aanvragen van meer informatie vul dit formulier in en fax het terug naar het desbetreffende nummer hieronder

36-SPC1000	Spirometrie PC Software	
36-SPCU100	Spirometrie PC Software upgrade voor Spida software	
36-SPC0105	Spirometrie PC Software extra gebruikers licentie	
36-ML3500	MicroLab spirometer	
36-ML3535	MicroLoop spirometer	
36-ML2525	SpiroUSB spirometer	
	Kartonnen mondstukken, disposable	
	MicroGard Pulmonale bacteriefilters	
	3 Liter Kalibratie spuit	

Titel:	Voornaam:
Achternaam:	
Functie:	
Naam Praktijk/organisatie:	
Adres:	
Postcode:	Land:
Tel:	Fax:
Email:	

Fax naar 0594-587288 of bel naar 0594-587280

## Systemvereisten

- Windows compatibel PC
- Processor: 800 MHz of hoger
- RAM: 256 MB
- Vrije ruimte op de harde schijf: 50 MB\*
- Vrije USB poort voor Spirometrie beveiligingssleutel
- Vrije USB poort of Seriële poort voor Spirometer\*\*
- Video: SVGA 800 x 600, 256 kleuren (Aanbevolen 1280 x 1024)

Daarnaast heeft u een Micro Medical SpiroUSB, MicroLab, MicroLoop Spirometer of Micro Medical hand held spirometer nodig.

## Eisen besturingssysteem

- Windows 2000 SP4
- Windows XP Home, Professional
- Windows Vista 32 bit/64 bit
- Windows 7

\*Vereisten kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moeten worden verworven. Tot 2GB per database.  
\*\*Type poort hangt af van specificatie van de Spirometer welke men gebruikt, raadpleeg uw handleiding van de spirometer..

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation

Nederland:  
Exclusief Importeur & distributeur  
PT Medical BV  
Kapteynlaan 13  
9351 VG LEEK  
Nederland

0594-587280 tel  
0594-587288 fax

mail@pt-medical.nl  
www.pt-medical.nl

International Sales:  
CareFusion Germany 234 GmbH.  
Leibnizstrasse 7,  
D-97204 Hoechberg,  
Germany.


Customer Services:  
+49 (0) 931 4972 670 tel  
+49 (0) 931 4972 423 fax

micro.internationalsales@carefusion.com  
carefusion.com/micromedical

CareFusion pursues a policy of continued improvement in design,  
production and performance of its products. The right is therefore  
reserved to vary details at any time and without notice.

© 2010 CareFusion Corporation or one of its subsidiaries.  
All rights reserved  
0000CF00711 Issue 1



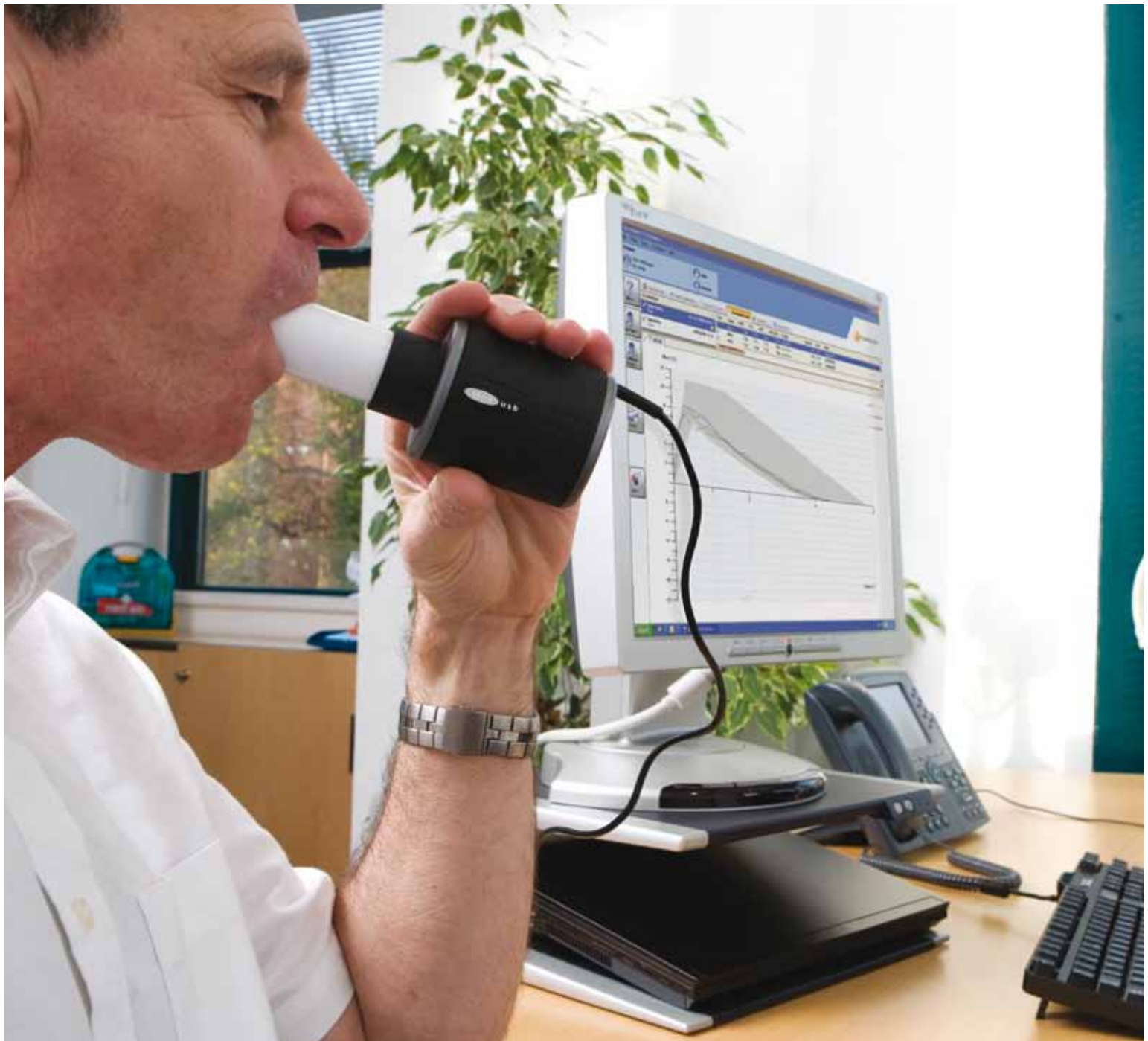

# Intelligentie voor Spirometrie

Spirometrie PC Software

## Maakt Spirometrie Eenvoudig

De Spirometrie PC Software is ontwikkeld en afgestemd op de wensen van vele professionals in de gezondheidszorg.

De multi window layout maakt het mogelijk om patiënten te testen met een minimum aan stappen – eenvoudig in gebruik!

Blaastesten zijn duidelijk en real time zichtbaar met een kleurcodering voor elke blaaspoging. De resultaten worden getoond in een overzichtelijke tabel, welke door de gebruiker zelf kan worden aangepast.

De geavanceerde zoekfunctie maakt het mogelijk om specifieke patiëntengroepen op basis van demografische gegevens of meetresultaten uit de database te selecteren.

Indien de spirometer is verbonden met de PC is het mogelijk om een real time test uit te voeren. Ook kunnen de resultaten geüpload - en toegevoegd worden aan een bestaande database.




## Als de spirometer is verbonden met de PC....

kunnen patiënten real time getest worden of kunnen resultaten geüpload worden vanuit de spirometer.



Krachtige database zoekfunctie

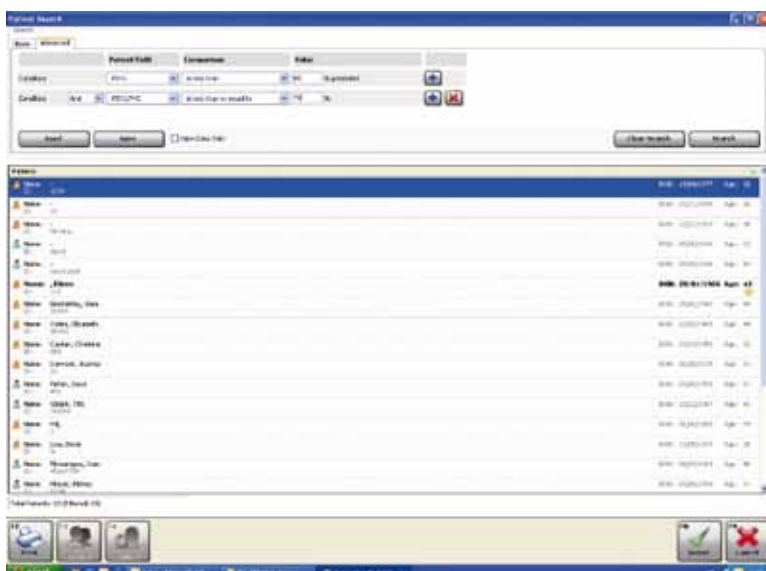

Keuze uit vier incentive displays







## Kenmerken

- Individuele patiënt selectie voor eenvoudiger testen en workflow
- Over elkaar leggen van eerdere testcurven ter vergelijking
- Er kunnen 50 verschillende Parameters worden gemeten – zowel inspiratoir als expiratoir
- Keuze uit vier verschillende incentive displays/ kinderaanmoediging
- Volledig ATS/ERS 2005 compatibel
- Weergave van voorspelde waarden, % predicted en Z score
- Geavanceerde en configureerbare zoekfunctie
- Upload van ALLE of individuele patiënt vanuit de spirometer
- Configureerbaar printformaat
- Eenvoudige koppeling naar patiënten dossier, His systeem of andere medische databases
- Export mogelijkheden naar PDF, CSV, Excel en MS Word
- On screen spirometer kalibratie / verificatie
- en uitgebreide log file van de kalibratie data
- Krachtige trend faciliteit
- Geavanceerde zoekfunctie
- Uitgebreide keus uit voorspelde waarden
- Uitgebreide helpfunctie - toegankelijk met één druk op de knop
- Configureerbare quick start afhankelijk van individuele of nationale voorkeuren

Kalibratie check weergave

Volledig configureerbaar rapport

