

Veelzijdige draadloze ECG apparaten

NR-1207-3 | NR-1207-E



De draadloze NR-1207-3 en NR-1207-E leveren innovatieve 12-leads ECG-oplossingen in een geavanceerd en compact apparaat.

Verkrijgbaar in twee configuraties.
Hoge kwaliteit en gebruiksgemak.
Rust-ECG, stress, holter en telemetrie.

Innovatieve oplossing die exclusief is ontworpen voor tablet/smartphone, stelt artsen in staat om ECG's altijd en overal te uploaden en te lezen.

BESCHIKBARE CONFIGURATIES

NR-1207 DRAADLOOS & MOBIEL

ALL-IN-ONE 12 LEAD ECG

- ECG, stress, holter, telemetrie
- MS Windows compatibel voor alle ECG's
- iOS, Android & MS Windows compatibel voor rust ECG

NR-1207-E DRAADLOOS & MOBIEL

12 LEAD INSPANNINGS ECG


- Inspannings en rust ECG
- MS Windows compatibel voor inspannings ECG
- iOS, Android & MS Windows compatibel voor rust ECG

De NR-1207-3 en NR-1207-E systemen functioneren onafhankelijk als stand-alone applicaties of kunnen worden gekoppeld aan het Norav Medical ECG Management System (NEMS).

KENMERKEN

- Klein en licht van gewicht
- Hoge resolutie ECG-verwerking
- Geavanceerde draadloze configuratie
- Naadloze integratie met HIS/EHR
- Compatibel met pc, tablet en smartphone
- Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijk

De NR-1207 serie van Norav Medical voldoet aan de vraag naar een compact 12-leads ECG-apparaat. De hoge kwaliteit en compatibiliteit met pc, tablet en smartphone maken de NR1207 serie tot de meest veelzijdige ECG-producten op de markt.

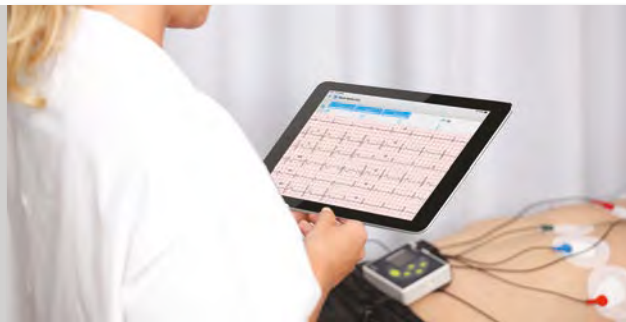

Functie	NR-1207-3	NR-1207-E
Programma's	Rust, inspanning, holter, telemetrie	Rust, inspanning
Lead kabel	Standaard 10-aders + 3, 4, 5, 7-aders AHA/IEC	Standaard 10-aders AHA/IEC
Defibrilatie bescherming	Ja, alleen met 'banaan' kabel	
Lead Off detectie	Ja	
Pacemaker puls detectie	Van 0,1 tot 2 ms bij 2 tot 700 mV	
Gevoeligheid	5, 10, 20, 40 mm/mV	
Horizontale schaal	12,5, 25, 50, 100 mm/sec	
Signaal dynamisch bereik	± 5 mV	
DC maximale ingangsspanning	± 800 mV	
Resolutie	12 bits (2,44 µV/LSB)	
ECG-bemonsteringsfrequentie	250, 500, 1000	
Ingangs impedantie	> 10 Mohm	
CMMR	> 90 db	
Frequentiebereik (-3 db)	0,05 - 260 Hz	
Laagdoorgangsfiler	20, 35, 40 Hz	
Basislijnfiler	Ja	
Lijnruisfiler	50/60 Hz	
Communicatieprotocollen	Bluetooth V2.2 + EDR, Class 1 tot 100 meter in open ruimte	
Batterij	1 x AA Alkaline of NIMH	
Bedrijfstijd	Tot 7 uur	
Afmeting	92 x 75 x 23 mm	
Gewicht	126 gr	
Veiligheidsnormen	IEC 60601-1; IEC 60601-2-47; IEC 60601-1-11	
Bedrijfstemperatuur	10° C tot 45° C	
Opslagtemperatuur	-20° C tot 60° C	
Vochtigheid	10 - 95 %	
IP-classificatie	IP22	

Alle producten van Norav Medical zijn ISO 13485, CE, 510(k) en Health Canada gecertificeerd.

"Made for iPhone", "Made for iPad" betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met iPhone/iPad en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen. iPhone en iPad zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

