



Intelligentie voor Spirometrie

Spirometrie PC Software

Maakt Spirometrie Eenvoudig

De Spirometrie PC Software is ontwikkeld en afgestemd op de wensen van vele professionals in de gezondheidszorg.

De multi window layout maakt het mogelijk om patiënten te testen met een minimum aan stappen en is eenvoudig in gebruik!

Blaastesten zijn duidelijk en real time zichtbaar met een kleurcodering voor elke blaaspoging. De resultaten worden getoond in een overzichtelijke tabel, welke door de gebruiker zelf kan worden aangepast.

De geavanceerde zoekfunctie maakt het mogelijk om specifieke patiëntengroepen op basis van demografische gegevens of meetresultaten uit de database te selecteren.

Indien de spirometer is verbonden met de PC is het mogelijk om een real time test uit te voeren. Ook kunnen de resultaten geüpload en toegevoegd worden aan een bestaande database.




Als de spirometer is verbonden met de PC....

kunnen patiënten real time getest worden of kunnen resultaten geüpload worden vanuit de spirometer.




Krachtige database zoekfunctie

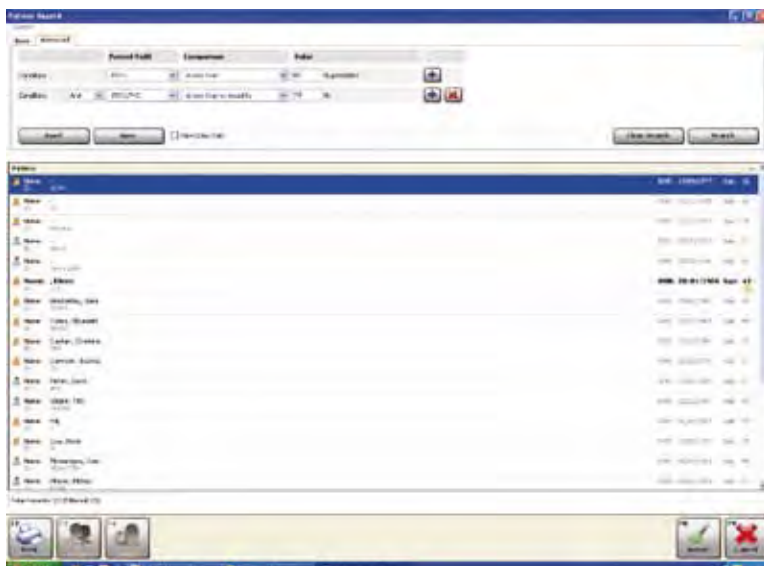

Keuze uit vier incentive displays






- Eenvoudig te gebruiken in multi-window layout
- Real time weergave van de manoeuvres
- Kwaliteits beoordeling van de blaaspoging
- Berekening van Long leeftijd en interpretatie op basis van ATS, NICE of Enright richtlijnen
- Pre en post bronchodilatatie vergelijking
- Volledig configureerbare scherm- en resultaten opties

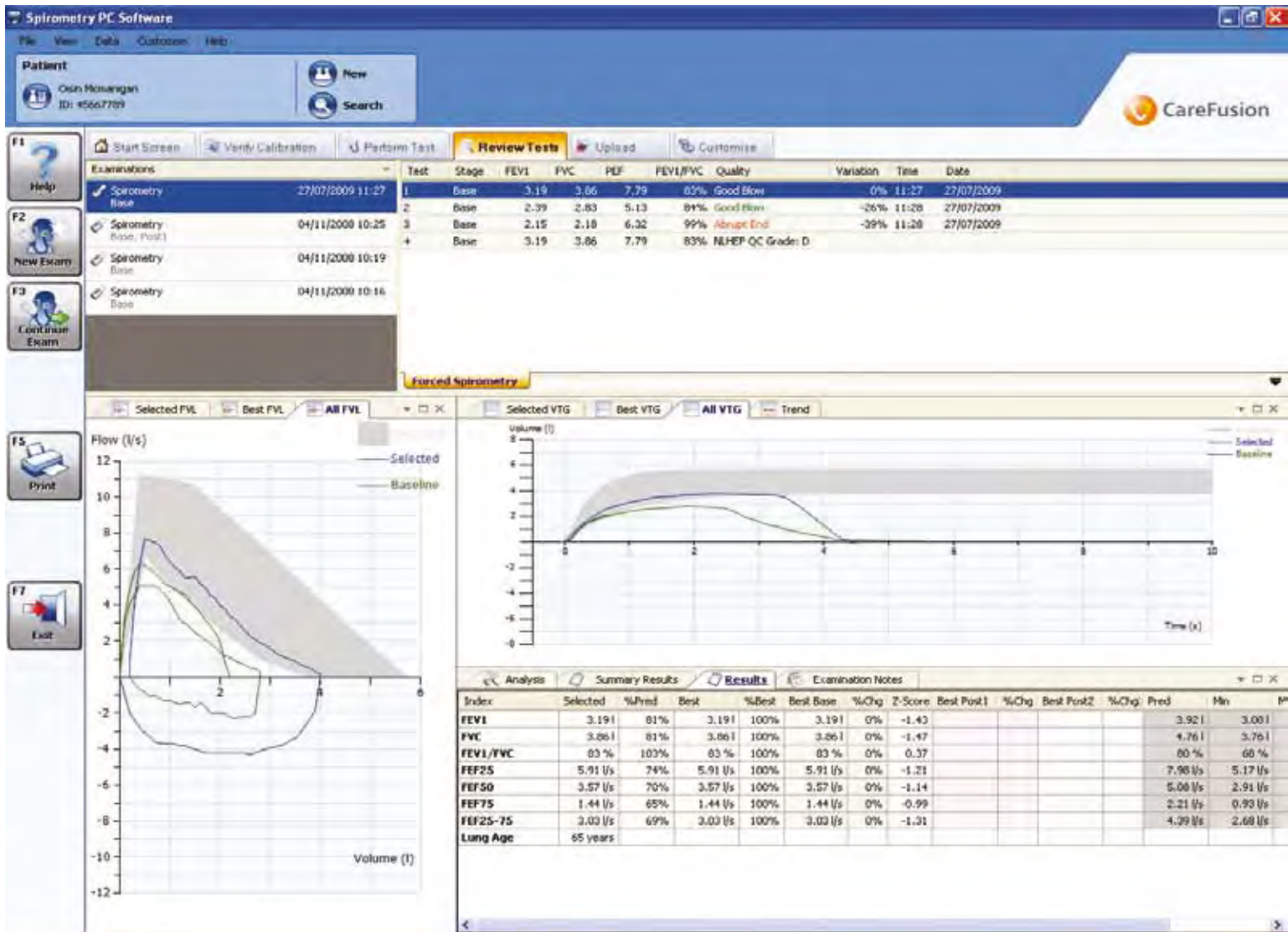

Verschillende waarden kunnen geselecteerd worden

Configureerbare instellingen incl. interpretatie en voorspelde waarden

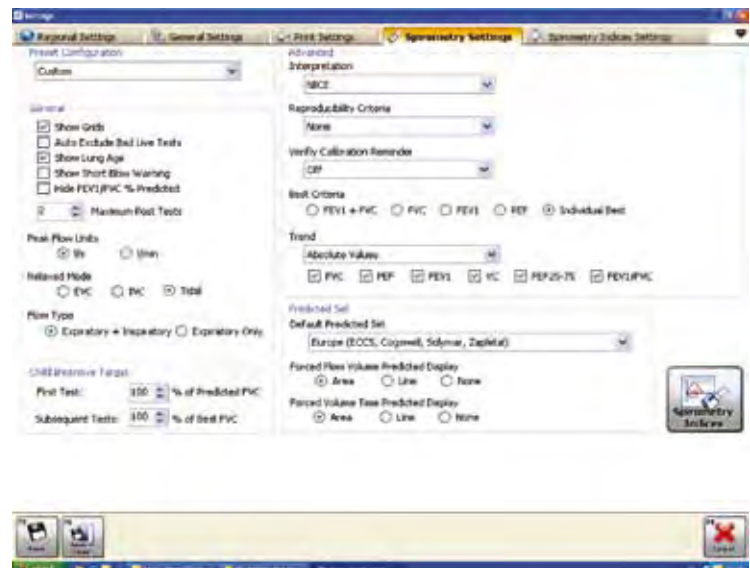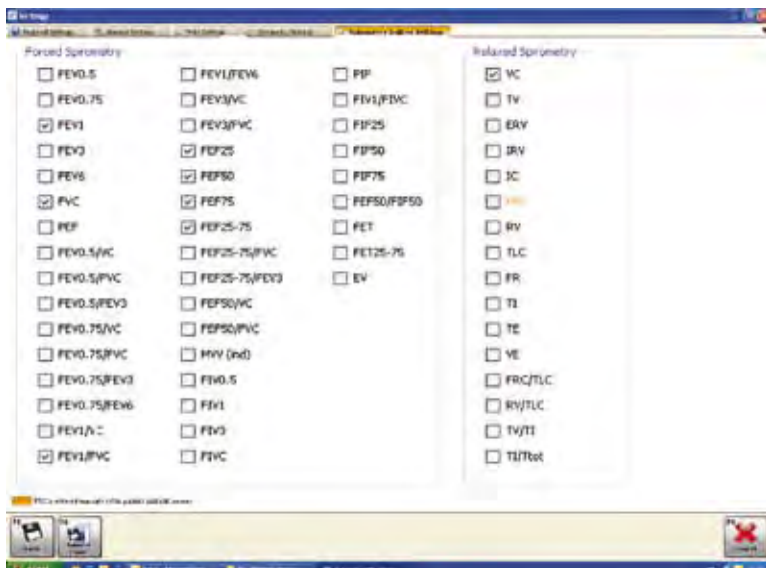

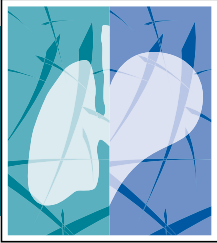

Systemvereisten

- Windows compatibel PC
- Processor: 1 GHz of hoger
- RAM: 2 GB
- Vrije ruimte op de harde schijf: 200 MB*
- Vrije USB poort voor Spirometrie beveiligingsleutel
- Vrije USB poort of Seriële poort voor Spirometer**
- Video: SVGA 800 x 600, 256 kleuren (Aanbevolen 1280 x 1024)

Daarnaast heeft u een Micro Medical™ SpiroUSB, MicroLab of MicroLoop Spirometer nodig.

Eisen besturingssysteem

- Windows® 7 32 bit,
- Windows® 7 64 bit,
- Windows® 8 32 bit,
- Windows® 8 64 bit,

*Vereisten kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moeten worden verworven. Tot 2GB per database.
**Type poort hangt af van specificatie van de Spirometer welke men gebruikt, raadpleeg uw handleiding van de spirometer.

Nederland:
Exclusief Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG LEEK
Nederland

0594-587280 tel
0594-587288 fax

mail@pt-medical.nl
www.pt-medical.nl

International Sales:
CareFusion Germany 234 GmbH.
Leibnizstrasse 7,
D-97204 Hoechberg,
Germany.

Customer Services:
+49 (0) 931 4972 670 tel
+49 (0) 931 4972 423 fax

micro.internationalsales@carefusion.com
carefusion.com/micromedical

CareFusion pursues a policy of continued improvement in design,
production and performance of its products. The right is therefore
reserved to vary details at any time and without notice.

© 2010 CareFusion Corporation or one of its subsidiaries.
All rights reserved
0000CF00711 Issue 1